



Eine 58%-wasserhaltige Tageslinse aus einem bi-ionischen Bio-Hydrogel, mit 2-kurviger Rückfläche, Komfortrandprofil und integriertem UV-Schutz.

Konzeption


Durch das bi-ionische „Bio-Hydrogel-Material“ der „ZEISS Contact Day 1 toric“ steht eine Tageslinse zur Verfügung, die eine ideale Balance zwischen guter Benetzbarkeit und hoher Spontanverträglichkeit bietet.

„ZEISS Contact Day 1 toric“ schafft die besten Voraussetzungen um bei normalem wie auch erhöhtem proteinhaltigem Tränenfilm und dem Wunsch nach langen, täglichen Tragezeiten eine gute Verträglichkeit anzubieten. Dem hohen Sauerstoffbedarf der Cornea wird durch eine hohe Sauerstoffdurchlässigkeit auch bei höheren Dioptriewerten Rechnung getragen.

Die „ZEISS Contact Day 1 toric“ eignet sich besonders zur Korrektur von Gesamtastigmatismen >0.50 in horizontalen oder vertikalen Achsenlagen in Verbindung mit Myopie. Ideal für Contactlinsen-TrägerInnen, die sich auch am Ende eines langen Tages einen hohen Komfort wünschen

Das Material

Durch die bi-ionische Zusammensetzung wirkt die „ZEISS Contact Day 1 toric“ wasserbindend und sorgt für einen stabil hohen Wassergehalt von 58%. Darüber hinaus reduziert sie die Verdunstung, vermindert Ablagerungen und schützt vor Reizungen und Unverträglichkeiten - selbst bei trockenen Augen. Das Ergebnis ist nicht nur eine gleichbleibend hohe Sehqualität, sondern auch ein angenehmes leichtes Frischegefühl.

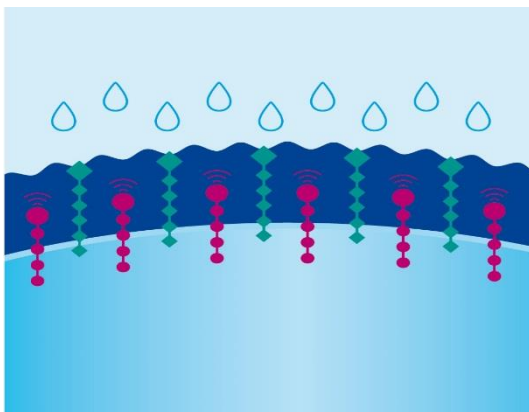

Hohe Wasserbindung: *Beim Binden und Absorbieren von Feuchtigkeit wird das bi-ionische Contactlinsenmaterial von benetzenden Wirkstoffen unterstützt - gut für TrägerInnen, die im Laufe des Tages ein Trockenheitsgefühl verspüren.*




Nicht ionische Tenside: *Oberflächenwirksame nicht ionische Benetzungskomponenten unterstützen die Bindung von Feuchtigkeit und verhindern das Anhaften von Tränenbestandteilen.*



Algin: *Der natürliche Inhaltsstoff wird aus Meerespflanzen extrahiert. Das stark wasserbindende Polymer hält gleichzeitig die Tränenflüssigkeit auf der Contactlinsen-Oberfläche und bildet einen natürlichen Schutzfilm.*

Hohe Ablagerungsbeständigkeit

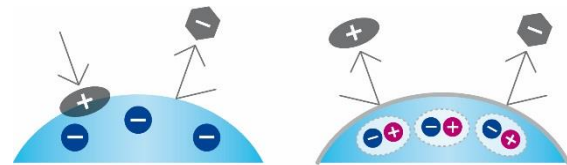

Bei konventionellen ionischen Contactlinsen (links) verursacht die negative Ladung der Contactlinsen-Oberfläche positiv geladene Ablagerungen, z.B. Proteine. Durch positiv und negativ geladene Ionen im Material der „ZEISS Contact Day 1 (rechts) bleibt die Ladung der Contactlinsen-Oberfläche neutral und Ablagerungen werden verhindert.


Sonnenschutz inklusive

Der aktive UV-Filter der „ZEISS Contact Day 1 toric“ unterstützt die natürlichen Schutzmechanismen des Auges und bietet einen zusätzlichen Schutz vor langfristigen Schäden durch UV-Strahlung.

Die Geometrie

Dank der besonderen Eigenschaften des Contactlinsen-Materials konnte die Geometrie der „ZEISS Contact Day 1 toric“ optimal auf heutige Trageanforderungen abgestimmt werden. So wurde nicht nur die

Randdicke gegenüber herkömmlichen Tageslinsen um 30 % reduziert, auch der Randbereich ist für eine Tageslinse aussergewöhnlich aufwändig gestaltet: Das zweiseitige, sanft abgerundete und leicht angehobene Randprofil sorgt für eine verbesserte Tränenunterspülung und irritationsfreies Gleiten der Contactlinse zwischen Lid und Bindehaut. Das schont das Auge, verringert die Infektionsgefahr und sorgt für ein lange anhaltendes Tragegefühl.

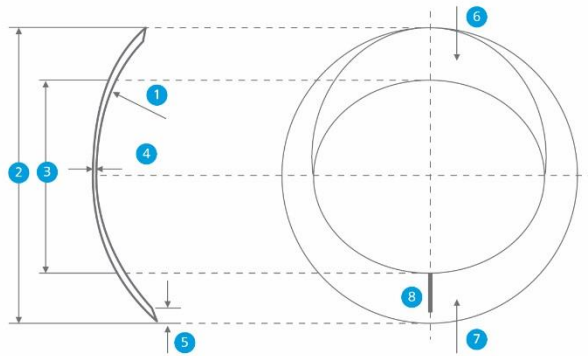

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Basiskurve | 2 Durchmesser T (\varnothing_T) |
| 3 Durchmesser VOZ (\varnothing_{VOZ}) | 4 Mittendicke t_c (t_c) |
| 5 Bevelbreite | 6 Slab-off |
| 7 Prismenballast | 8 Strichmarkierung |

Technische Daten

Material: bi-ionisches Bio-Hydrogel (42%)
 (UV-Filter, nicht ionisch)
 Handling-tint: hellblau
 Herstellungsmethode: Formguss
 Wassergehalt: 58%
 Vorderfläche: sphärische vorderoptische Zone (VOZ), dynamischer Prismenballast oberer Slab-off, adaptive Designkontrolle
 Rückfläche: zweikurvig torisch mit Komfortrandprofil
 Randdesign: asphärisch
 Sauerstoffdurchlässigkeit: Dk/t (-3.0) 41.9×10^{-11} Barrer

Anpassung

Die Contactlinsen sollten angenehm am Auge zentrisch sitzen, beim Lidschlag sowie bei schnellem Wechsel der Blickrichtung nach 4 Stunden Tragezeit, immer noch frei beweglich und gleichmässig gleitend auslenken.

Beide Hauptschnitte der aktuellen Refraktionswerte auf HSA=0 umrechnen.

Als zusätzliche Kriterien gelten:

- Erste Anpass-Contactlinse nach dem angefügten Schema auswählen.
- Toleranztest nach 30 min.
- Sitzbeurteilung (gute Zentrierung, moderate Bewegung), Überprüfen der Inklination anhand der Strichmarkierung in 270°.
- Überrefraktion sphärisch.

Horizontaler HH-Durchmesser:
 +2.00 (+/- 0.5 mm)

Basiskurve:
 1.0 mm zum flacheren HH-Meridian (+/- 0.3 mm)

Stärke:
 Sphäre + ½ Zylinder der aktuellen Refraktionswerte bei HSA 0 mm

Linsenpflege

Um einen optimalen Tragekomfort zu erreichen, wird die Verwendung der CONTOPHARMA Spül-Lösung „daily soft“ empfohlen. Diese enthält die Grundbestandteile (u.a. Hyaluron) der Produktfamilie der CONTOPHARMA Comfort-Lösungen und darüber hinaus spezielle Komponenten zur Neutralisierung freier Radikale. CONTOPHARMA „daily soft“ ist geeignet für das Abspülen, Equilibrieren sowie Konditionieren der Tageslinsen vor dem Aufsetzen oder direkt danach am Auge.

Zur Nachbenetzung eignen sich hervorragend die CONTOPHARMA Comfort-Lösungen.

Mit der Lösung „drop&see“ werden bei geringer Tränenmenge durch die Ausgewogenheit der Wirkstoffe die Zellfunktionen der Hornhaut unterstützt.

Mit der Lösung „lens&lid“ werden durch die optimierte Zusammensetzung die CL-Oberflächen vor Verunreinigungen während des Tragens geschützt.

Die unkonservierte Lösung „drop&see MD“ in wieder verschliessbaren Monodosen eignet sich speziell für empfindliche Augen.

Neben klassischen Augentropfen können Augensprays auf wässriger oder liposomaler Basis den Tragekomfort vor allem bei längeren täglichen Tragezeiten erhöhen.

Tragekonzept

Die Contactlinsen „ZEISS Contact Day 1 toric“ sind für einmaliges Tagetragen empfohlen.

Warnhinweis

Contactlinsen, die UV-Strahlung absorbieren, sind kein Ersatz für andere Schutzmassnahmen, wie Korrektions- oder Sonnenbrillen, die ebenfalls einen UV-Schutz aufweisen. Der Anwender sollte sich wie bis anhin mit geeigneten Mitteln zusätzlich vor Strahlung schützen.

Bis heute ist nicht erwiesen, in welchem Masse UV-Strahlung absorbierende Contactlinsen Einfluss auf die Häufigkeit von Augenveränderungen, bedingt durch UV-Strahlung, haben können.

Lieferprogramm, Verpackungsarten:

Lieferprogramm:

Durchmesser	mm	14.20
Basiskurve	mm	8.80
Scheitelbrechwert		
<u>Sphäre</u> Minus	dpt	plan bis -6.00 (Abstufung in 0.25 dpt)
	dpt	sph -6.50 bis -10.00 (Abstufung in 0.50 dpt)
<u>Zylinder / Achsen</u>		-0.75, -1.25, -1.75 cyl (10°/20°/70°/90° 110°/160°/170°/180°)
		-2.25 cyl (180°)

Verpackung: Pack zu je 8 Contactlinsen in Blister
 Pack zu je 32 Contactlinsen in Blister

Die neue Box der ZEISS Contact Day 1 toric ist ideal, wenn es unterwegs mal schnell gehen muss: sie ist besonders leicht zu öffnen und kann mit einem Fingertipp wieder verschlossen werden.

Literatur

¹⁾ Data on File Wöhlk Contactlinsen GmbH, D-24232 Schönkirchen

ZEISS Contact Day 1 toric

Geometrie, Lieferbereich, Verwendung und Anpassung

GEOMETRIE

Rückfläche:

Zweikurvig torisch mit Komfortrandprofil

Vorderfläche:

Sphärische vorderoptische Zone (VOZ), dynamischer Prismenballast, oberer Slab-off, adaptive Designkontrolle

LIEFERBEREICH

Basiskurve:

8.80

Durchmesser:

14.20

Dioptrie:**Sphäre:**

Plan bis -6.00 [0.25]
-6.50 bis -10.00 [0.50]

Zylinder / Achsen:

-0.75/-1.25/-1.75 (10°/20°/70°/90°
110°/160°/170°/180°)
-2.25 (180°)

VERWENDUNG

Für stabiles Sehen bei Stabsichtigkeit (Astigmatismus) in Verbindung mit Kurzsichtigkeit (Myopie)

Bei Gesamtastigmatismen > 0.50 dpt in horizontalen oder vertikalen Achslagen

ANPASSEMPFEHLUNG

Durchmesse:

HH-Durchmesser +2.0 (+/-0.5 mm)

Basiskurve:

1.0 mm zum flachen HH-Meridian addieren (+/-0.3 mm)

Dioptrie:

Beide Hauptschnitte der aktuellen Sehstärkenprüfung auf HSA=0 umrechnen

a) Erste Anpasslinse nach folgendem Schema wählen:

	Brille / Zylinder (dpt)						
Brille / Sphäre (dpt)	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	über- -2.25
±0.00 ~ -3.00	-0.75	-0.75	-0.75	-1.25	-1.25	-1.75	-1.75
-3.25 ~ -6.00	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-1.25	-1.25	-1.75
-6.25 ~ -10.00	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-1.25	-1.25	-1.75

Beispiel:**Brille:**

R: -4.00 / -1.25 A 180°

L: -4.50 / -0.75 A 180°

Contactlinse:

R: -3.75 / -0.75 A 180°

L: -4.00 / -0.75 A 180°

b) Toleranztest ca. 30 min

c) Sitzbeurteilung (gute Zentrierung, moderate Bewegung); Überprüfen der Inklination anhand der Strichmarkierung in 270°

d) Überrefraktion sphärisch